

Formação em CAA com o ADAPTE Board



Baixe o guia da aula
adapte.com.br/guia-caa-missioneira

Macrorregião Missioneira · formação itinerante, 29/09 a 03/10/2026

Emanuel Santana · ADAPTE Educação · board.adapte.com.br

O percurso das quatro horas

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 01 | Bloco 1 · 120 min | CAA e caso de prática · conta e tela inicial · falar na prancha · ajustes para a pessoa |
| 02 | Intervalo · 15 min | Fora da carga contratada. Sair e voltar não tira nada de ninguém. |
| 03 | Bloco 2 · 120 min | Minhas pranchas · Biblioteca, compartilhar, idiomas e A4 · revisão e roteiro de configuração |

Combinados de segurança

Aqui, sempre

Caso fictício, com nomes inventados
Ninguém encena deficiência
Aparelho próprio, em dupla ou sozinho
A rota em papel vale igual

Aqui, nunca

Nome, foto, diagnóstico ou mensagem de paciente
Senha compartilhada
Avaliação, prescrição ou terapia
Meta de fala para quem usa CAA

01

CAA e o caso de prática

20 minutos · conceito mínimo, cinco movimentos do parceiro e o Heitor

Comunicação é direito, não recompensa.

A pessoa pode dizer não, mudar de ideia, pedir pausa e ser ouvida, mesmo sem provar que entende figuras.

Cinco ideias que precisam ficar

1

Direito

Comunicar é direito, e a prancha fica disponível sempre

2

Multimodal

Gesto, vocalização, apontar, escrita e figura valem juntos

3

Autoria

A pessoa decide o que diz; ninguém escolhe por ela

4

Modelar

Tocar enquanto fala, sem cobrar resposta

5

Além de pedir

Comentar, recusar, perguntar, informar, reparar

Modelar ou testar?

Pergunta-teste (evitar)

“Cadê o suco? Mostra o suco no Board.”
Você já sabe a resposta e só quer ver se a pessoa acerta.

Comentário-modelo (praticar)

“Eu QUERO suco. Hoje tem suco de uva.”
(toca quero enquanto fala)
Você diz algo seu, com o recurso na mão.

Os cinco movimentos do parceiro

1

Oferecer acesso

A prancha ao alcance antes de qualquer pedido

2

Modelar

Uma ou duas palavras por vez, sem exigir repetição

3

Esperar

Pausa real; contar até dez em silêncio

4

Reconhecer

Responder à modalidade usada; sinal ambíguo vira hipótese

5

Reparar

“Acho que entendi errado. Vou tentar de novo.”

O caso de prática: Heitor

Heitor, 26 anos, personagem fictício. Sábado à tarde, café na cozinha com Marina (irmã) e Otávio (pai). Na semana, consulta de fisioterapia no serviço de reabilitação.

Nestas duas cenas, ele consegue comentar, recusar, perguntar e pedir ajuda?

O que o Heitor precisa dizer no café da tarde

Núcleo, franja e o que é só dele

Vocabulário do caso

Núcleo: eu, você, quero, não, mais, gosto, diferente, acabou, ajuda, isso.

Franja: café, pão, bolo, quente, frio, quintal, música.

Pessoal: Bolota (o cachorro), sítio da vó.

Rápidas: “Me dá um minuto”, “Não entendi, repete”.

3 min

Direito ou barreira?

“O sistema fica guardado para não distrair.”

“Primeiro precisa provar que entende figuras.”

“A pessoa pode dizer não e mudar de ideia.”


Responda em dupla, em voz baixa.

02

Conta, instalação e tela inicial


25 minutos · abrir, nomear as partes da tela, entrar com o Google, instalar

board.adapte.com.br funciona sem conta

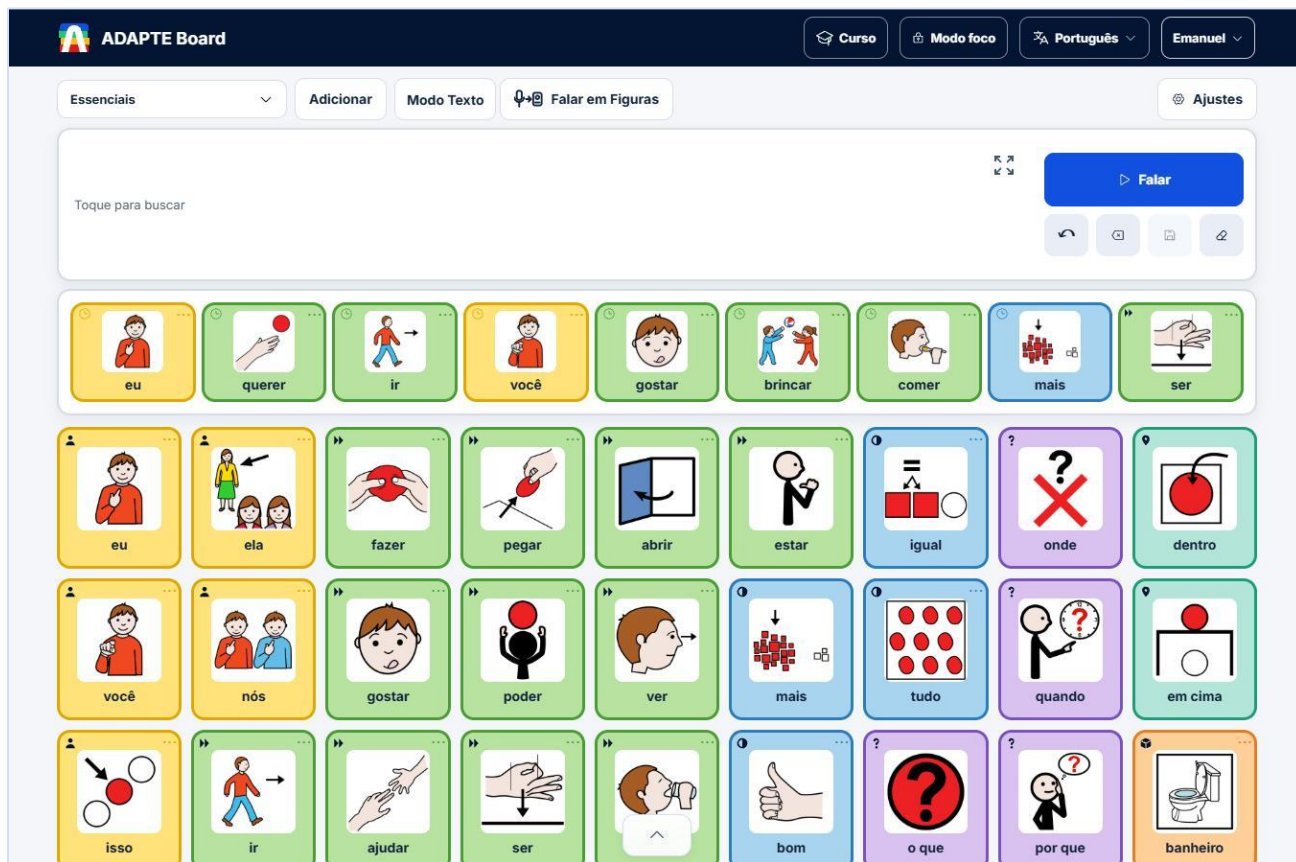

Captura real da prancha Essenciais, 28/09/2026

O mapa da tela em seis partes

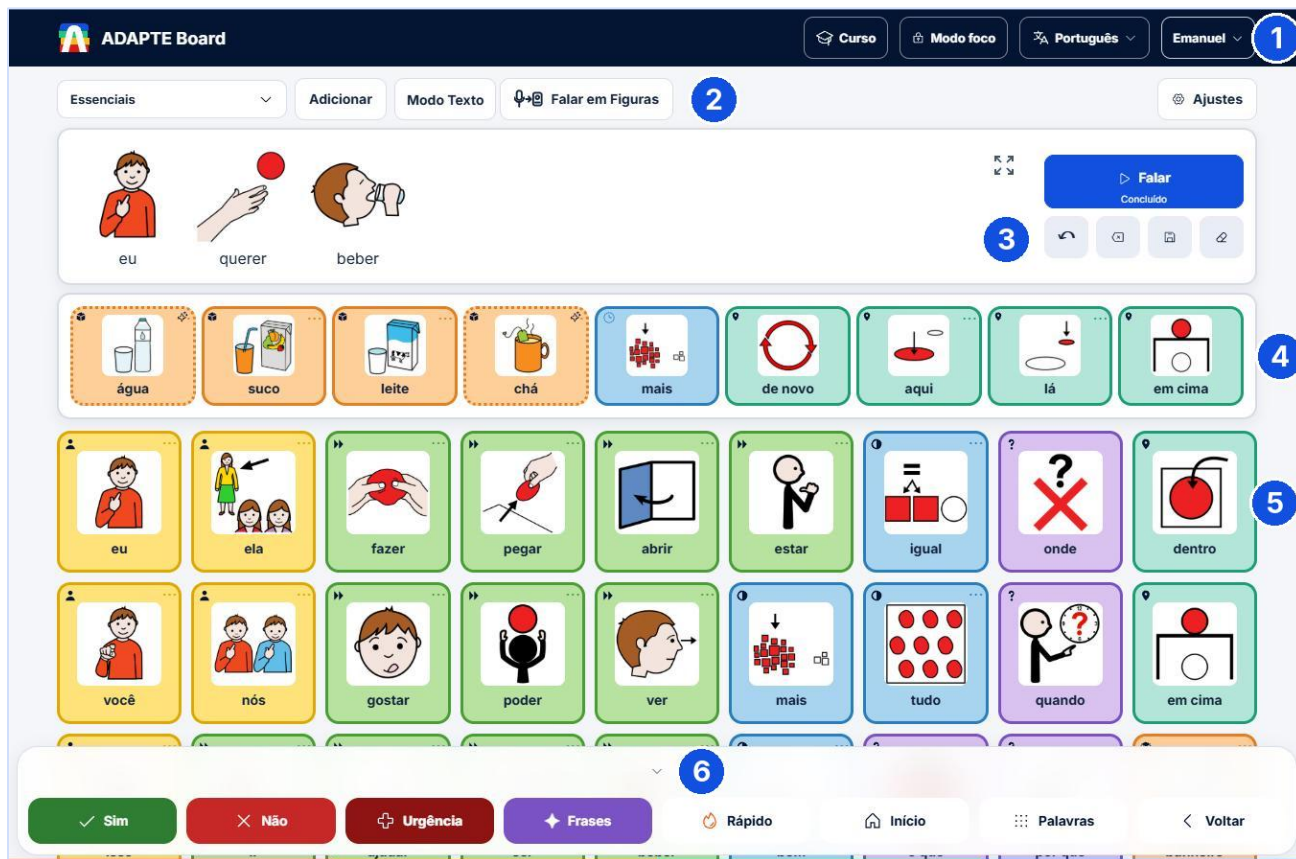

1 Cabeçalho (Curso, Modo foco, Idioma, Conta) · 2 Barra de modos (Trocar prancha, Adicionar, Modo Texto, Falar em Figuras, Ajustes) · 3 Barra da frase e Falar · 4 Sugestões · 5 Grade de cartões com cores · 6 Dock (Sim, Não, Urgência, Frases, Rápido, Início, Palavras, Voltar)

Entrar com o Google, sem senha nova


Entrar no ADAPTE Board

Entrar guarda suas pranchas e seus cartões na sua conta, para abrir em outro aparelho.
Sem conta, a prancha funciona do mesmo jeito: [voltar à prancha](#).

Entrar, no alto. Marque a confirmação de maior de idade. Escolha a conta Google.

Com conta, as pranchas abrem em outro aparelho. Sem conta, a prancha funciona do mesmo jeito.

O menu da conta

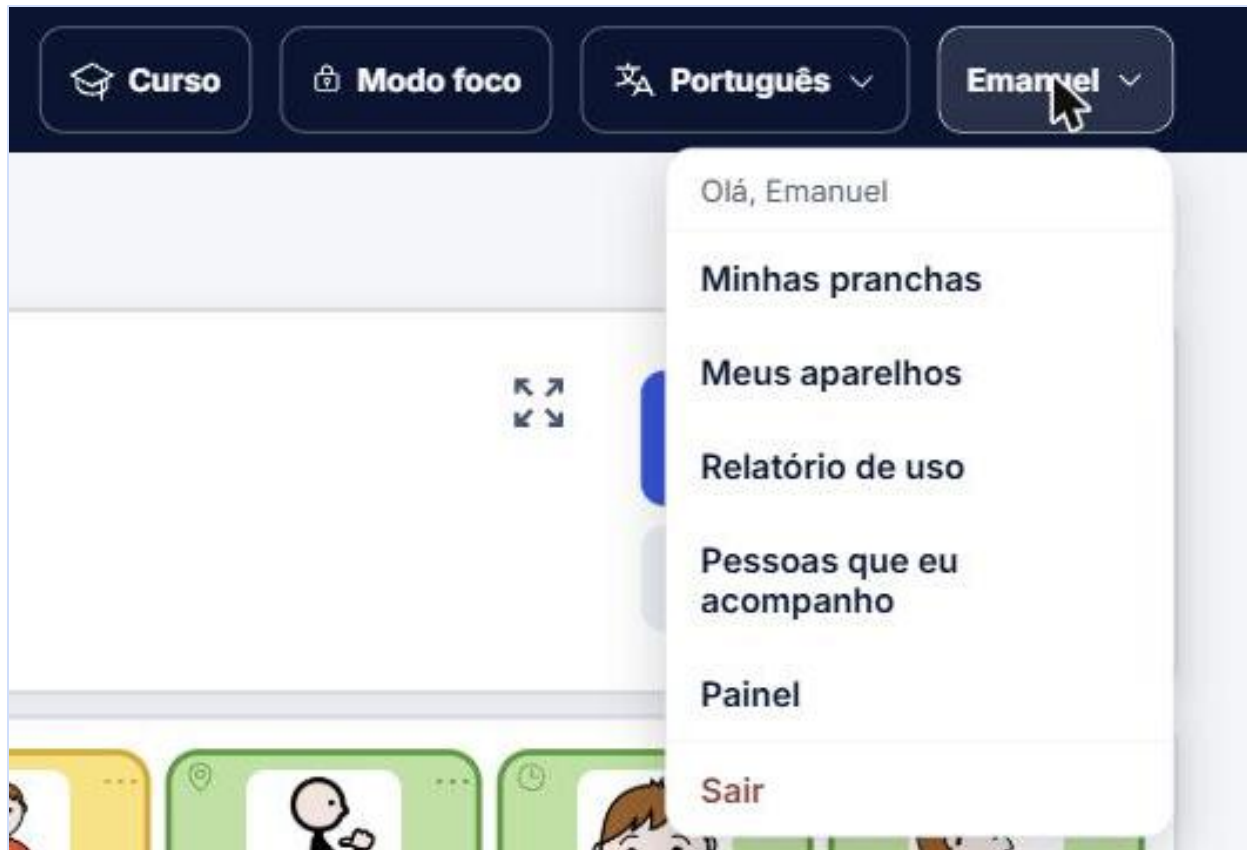


Minhas pranchas, Meus aparelhos, Relatório de uso, Pessoas que eu acompanho, Sair.

Sair só desconecta este aparelho; as pranchas continuam guardadas na conta.

Menu que abre ao tocar no seu nome, no alto

Instalar como aplicativo e usar sem internet

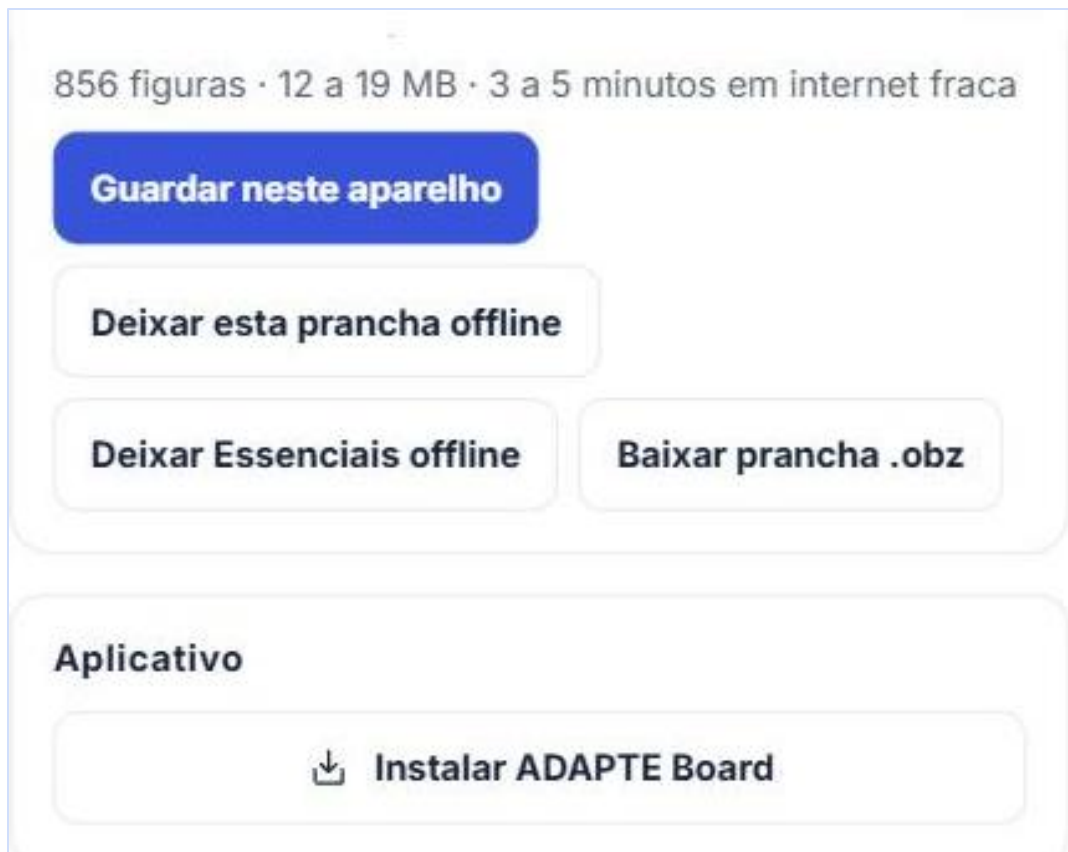

Painel de Ajustes, seções Usar sem internet e Aplicativo

Android e computador: Ajustes, Instalar ADAPTE Board. iPhone e iPad: Safari, Compartilhar, Adicionar à Tela de Início.

Antes de sair de casa: Usar sem internet, Guardar neste aparelho. A prancha abre igual sem rede.

10 min

Prática guiada 1: abrir, entrar, instalar

1. Abra board.adapte.com.br.
2. Entre com o Google (opcional).
3. Instale na tela inicial.
4. Toque em três cartões e ouça.

03

Falar na prancha

30 minutos · Essenciais, barra da frase, Falar, Sugestões, busca, categorias e Modo Texto


Tocar, ouvir, montar a frase, Falar



The screenshot displays the ADAPTE application interface for sentence construction. At the top, there are navigation buttons: "Essenciais" (with a dropdown arrow), "Adicionar", "Modo Texto", "Falar em Figuras" (with a microphone icon), and "Ajustes" (with a gear icon). The main area is divided into two sections. The top section shows a sequence of three icons: a person pointing (labeled "eu"), a hand holding a red ball (labeled "querer"), and a person drinking from a cup (labeled "beber"). To the right of these icons is a blue button labeled "Falar" with a play icon and the text "Interrompido" below it. Below the "Falar" button are four smaller icons: a circular arrow, a square with an 'x', a document, and a pencil. The bottom section is a horizontal bar containing nine icons in colored boxes: "água" (water bottle and glass), "suco" (juice box and glass), "leite" (milk carton and glass), "chá" (tea pot and cup), "mais" (down arrow and blocks), "de novo" (circular arrow), "aqui" (down arrow and circle), "lá" (down arrow and circle), and "em cima" (up arrow and circle).

Barra da frase com “eu querer beber” e a linha Sugestões · a Frase natural fala “eu quero beber”

Sugestões: a próxima palavra sem trocar de pasta

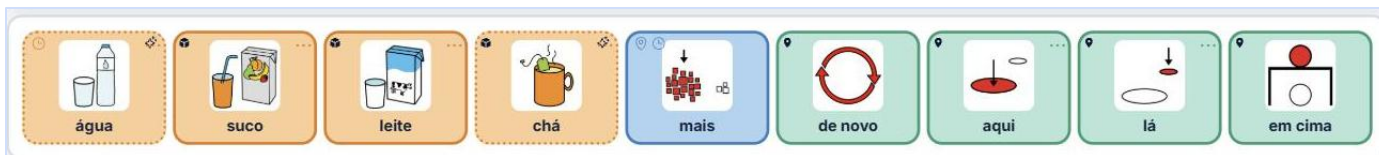

Depois de cada palavra, a linha oferece as próximas prováveis.

A sugestão oferece, não decide. Liga e desliga em Ajustes, Mostrar sugestões.

Linha Sugestões depois de “eu querer beber”

Corrigir sem medo




Desfazer, Apagar último, Salvar frase, Limpar tudo.

Limpar tudo não pede confirmação;
Desfazer é a rede de segurança.


Botões ao lado de Falar

Mostrar mensagem ampliada

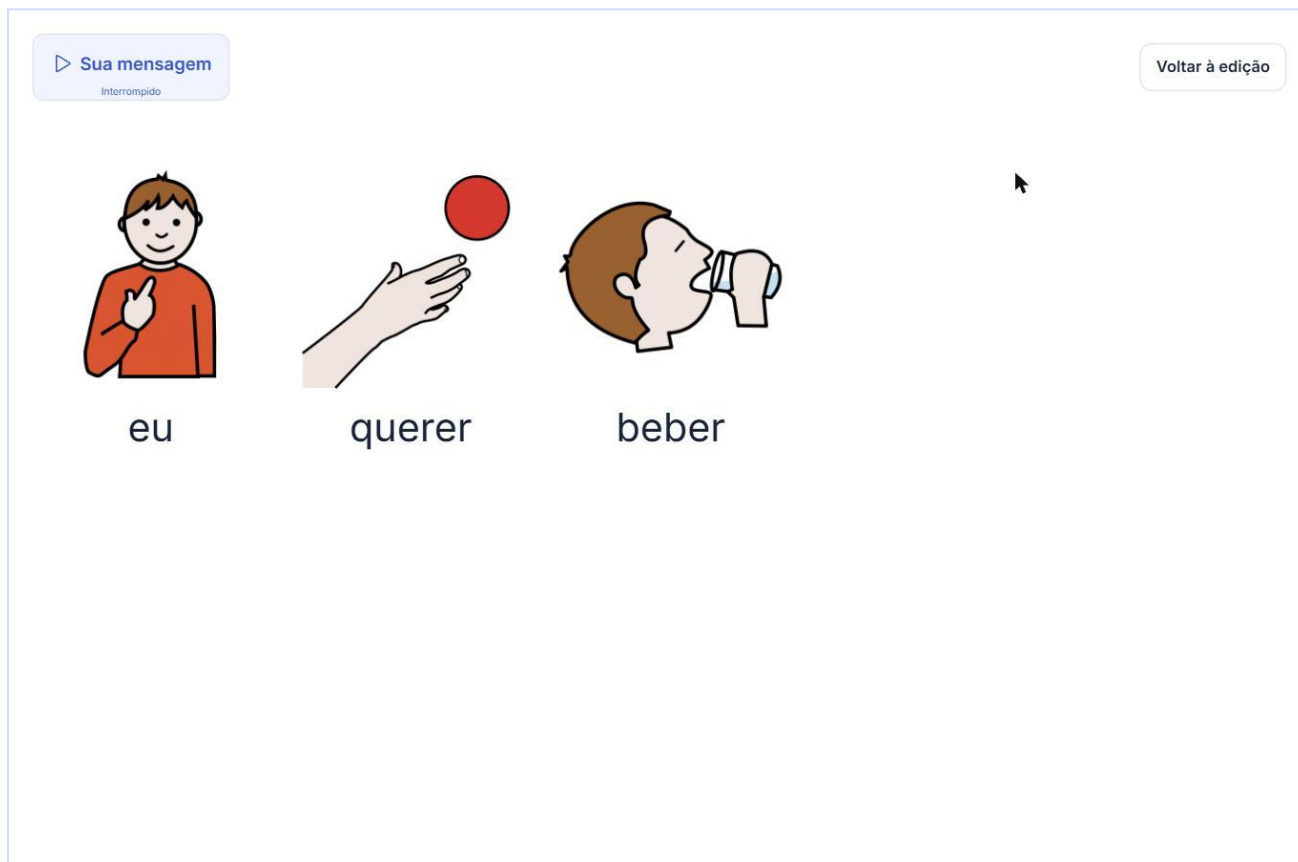


Para mostrar de longe ou em lugar barulhento. A ampliada não fala sozinha: Sua mensagem toca a voz; Voltar à edição retorna.

Toque para buscar: onde a palavra mora

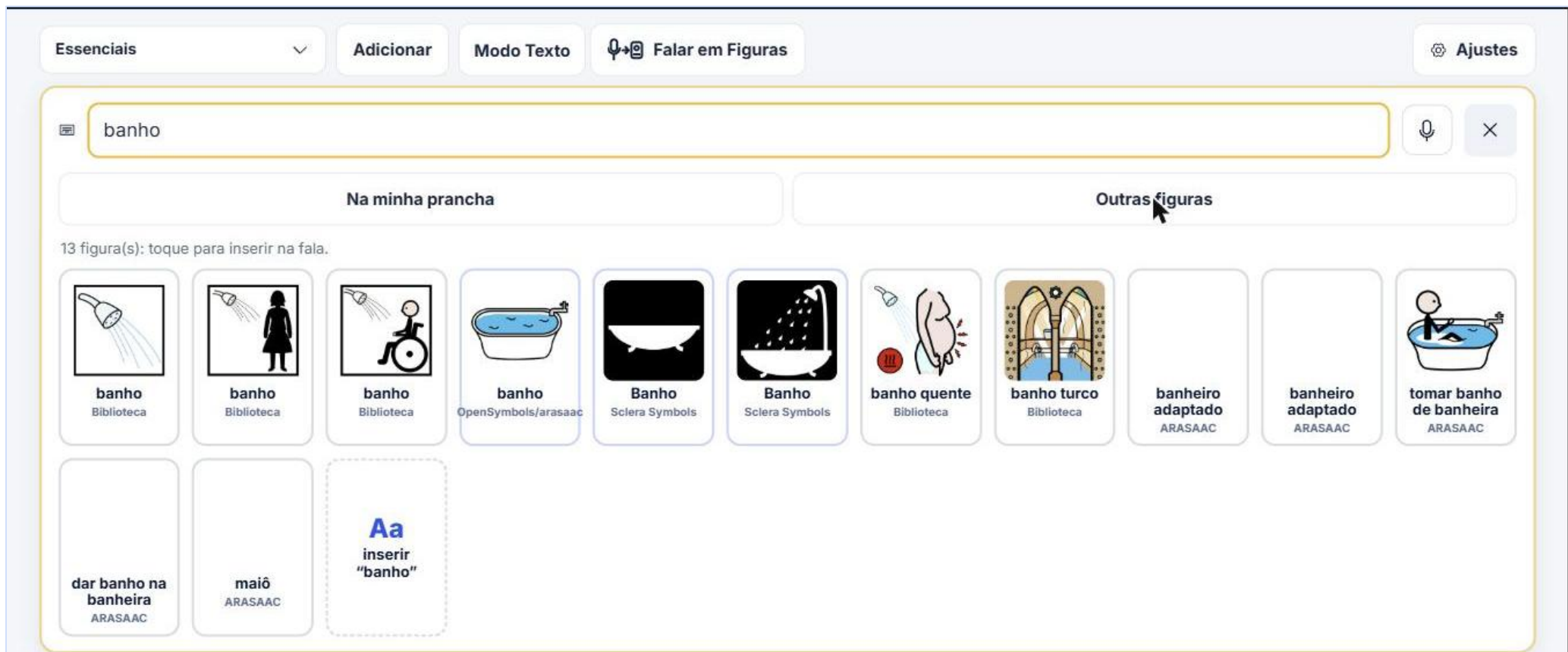


“Na minha prancha” mostra em que pasta a palavra está · “Outras figuras” traz figuras que ainda não estão na prancha · sem figura, dá para inserir só o texto

Pastas, caminho e cores

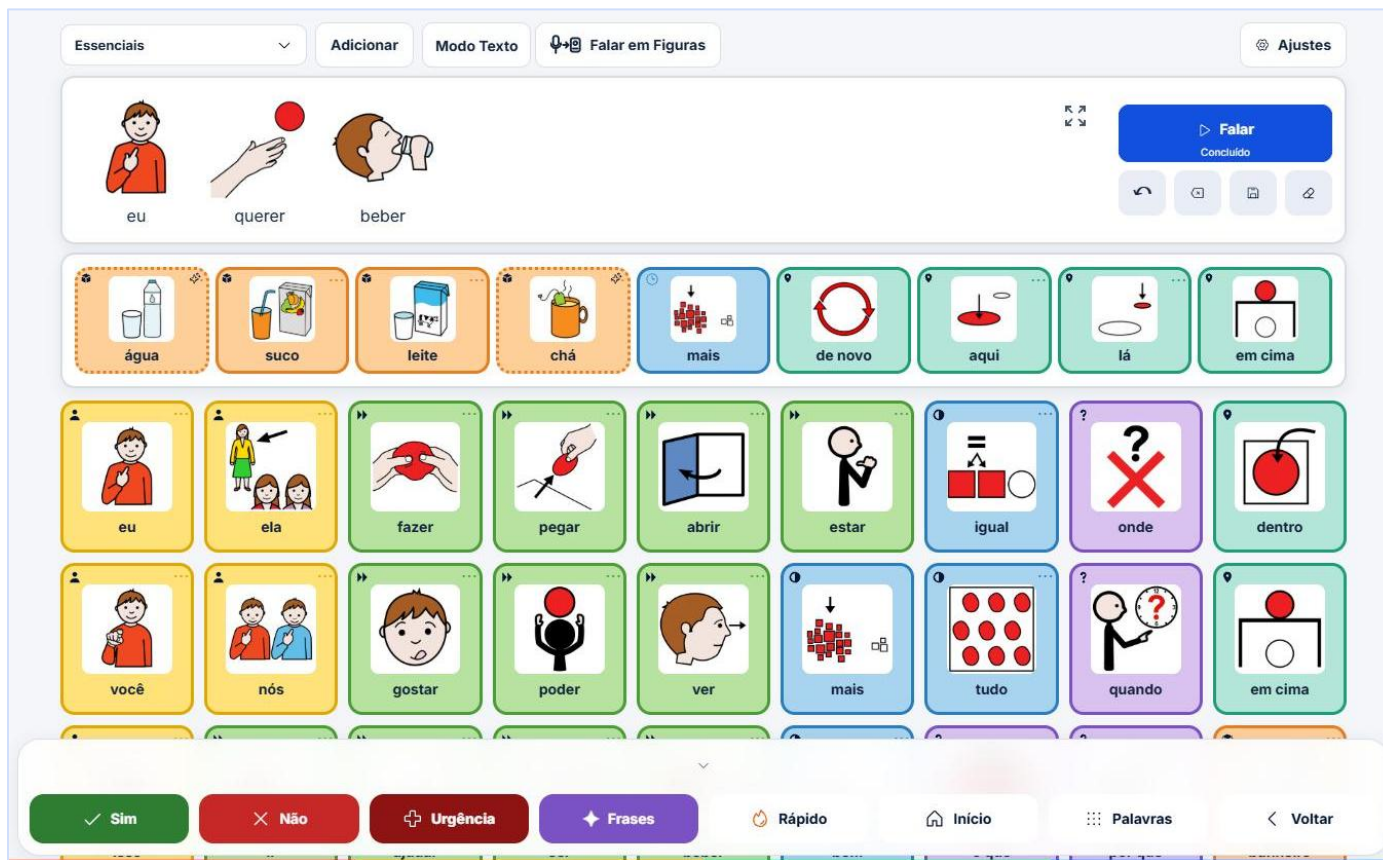

Palavras abre as pastas · Voltar sobe um nível · Início volta à prancha principal · cores: pessoa amarelo, ação verde, descrição azul, pergunta roxo, coisa laranja, social rosa

O dock: respostas que não esperam

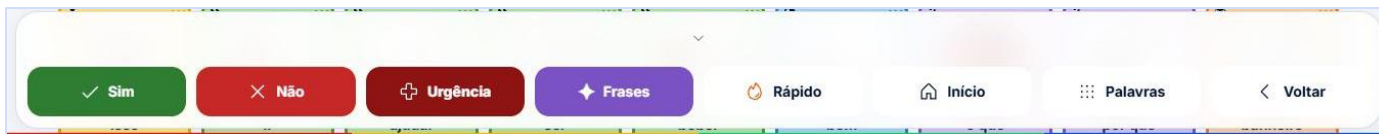


Sim e Não falam na hora. Urgência: socorro sem sair da tela. Frases: prontas e salvas. Rápido: reparo.

O Não é resposta legítima. Se o adulto insiste, a pessoa aprende que o cartão não funciona.

Dock na parte de baixo, visível em qualquer pasta; a seta recolhe e o botão central traz de volta

Trocar prancha: Essenciais, Escola, Hospital, Casa

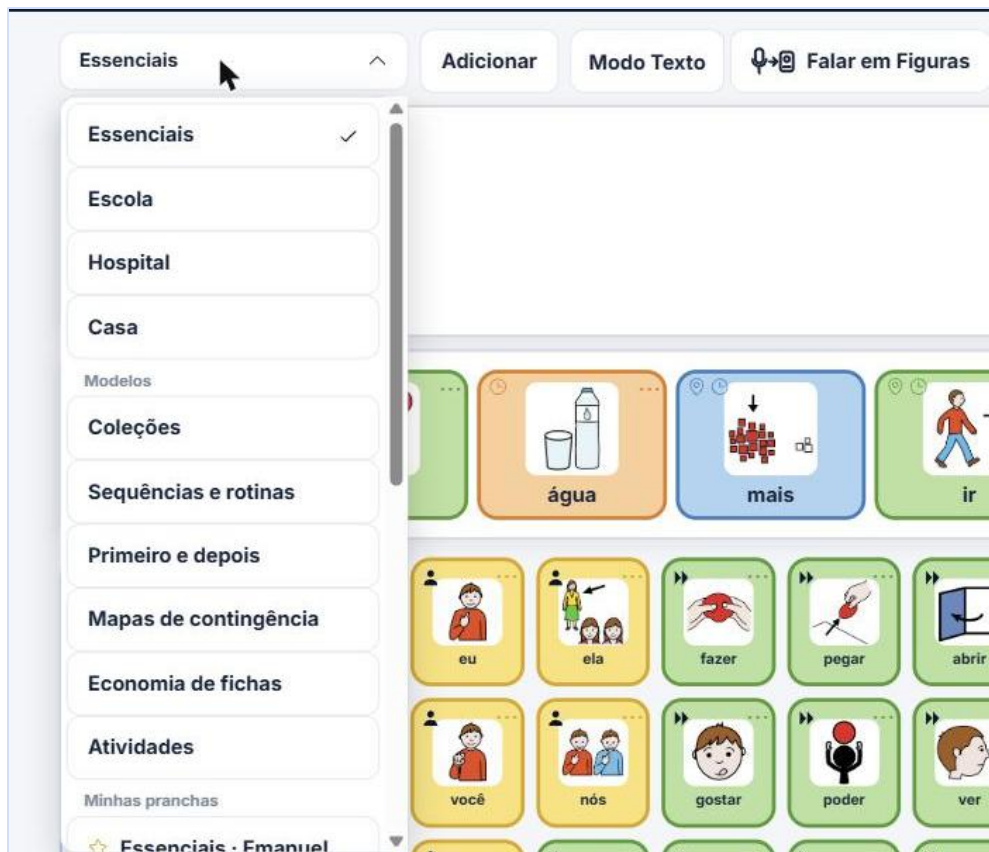


Menu Trocar prancha, na barra de modos

O vocabulário principal continua; muda o contexto. Abaixo, os Modelos e a Biblioteca.


Trocar de prancha não apaga a frase em construção. Com conta, aparecem Minhas pranchas.

Hospital: o vocabulário da consulta

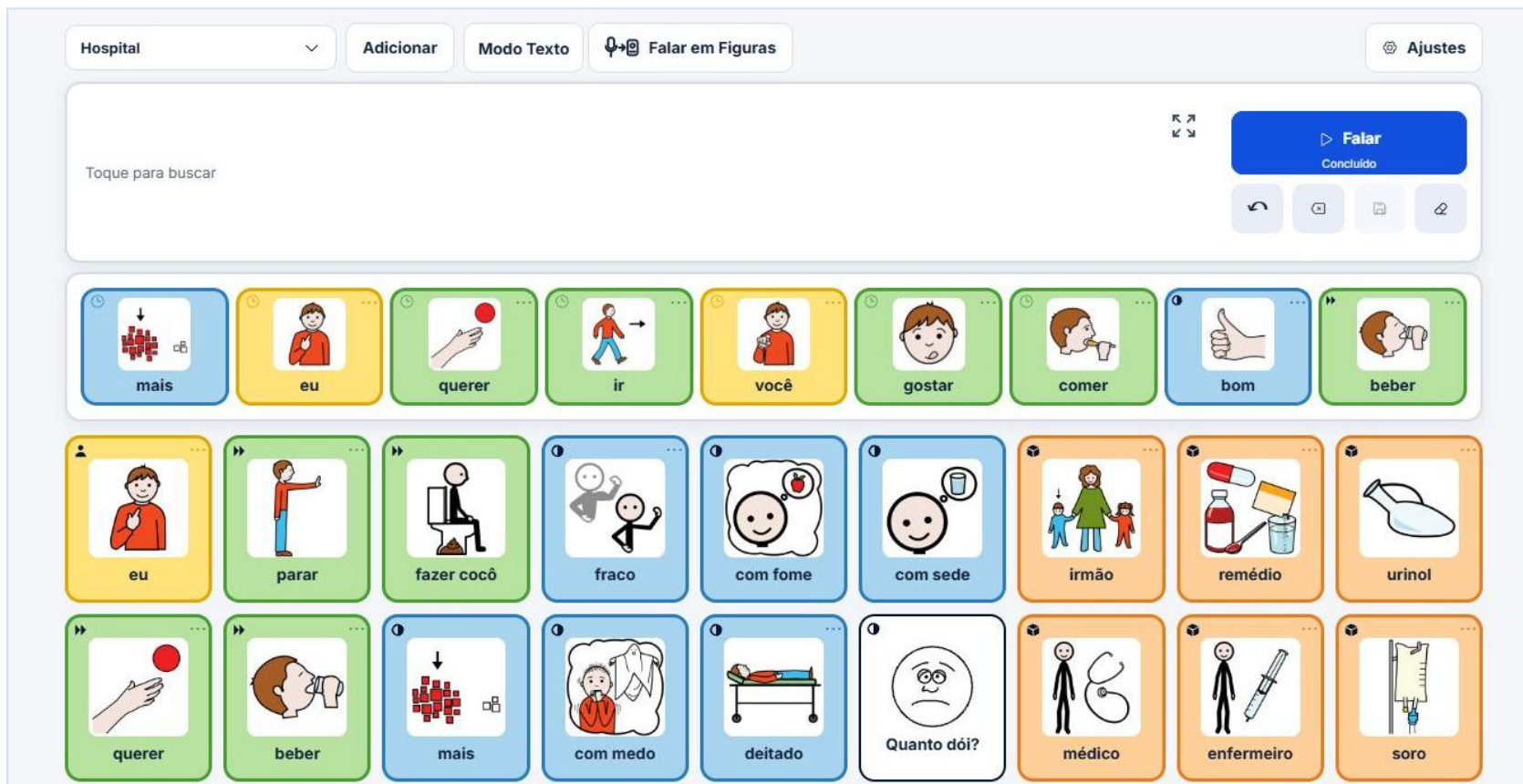

Prancha Hospital com fraco, com fome, com sede, com medo, deitado, remédio, médico, enfermeiro, soro, urinol e o cartão Quanto dói?

Onde dói? e Quanto dói?

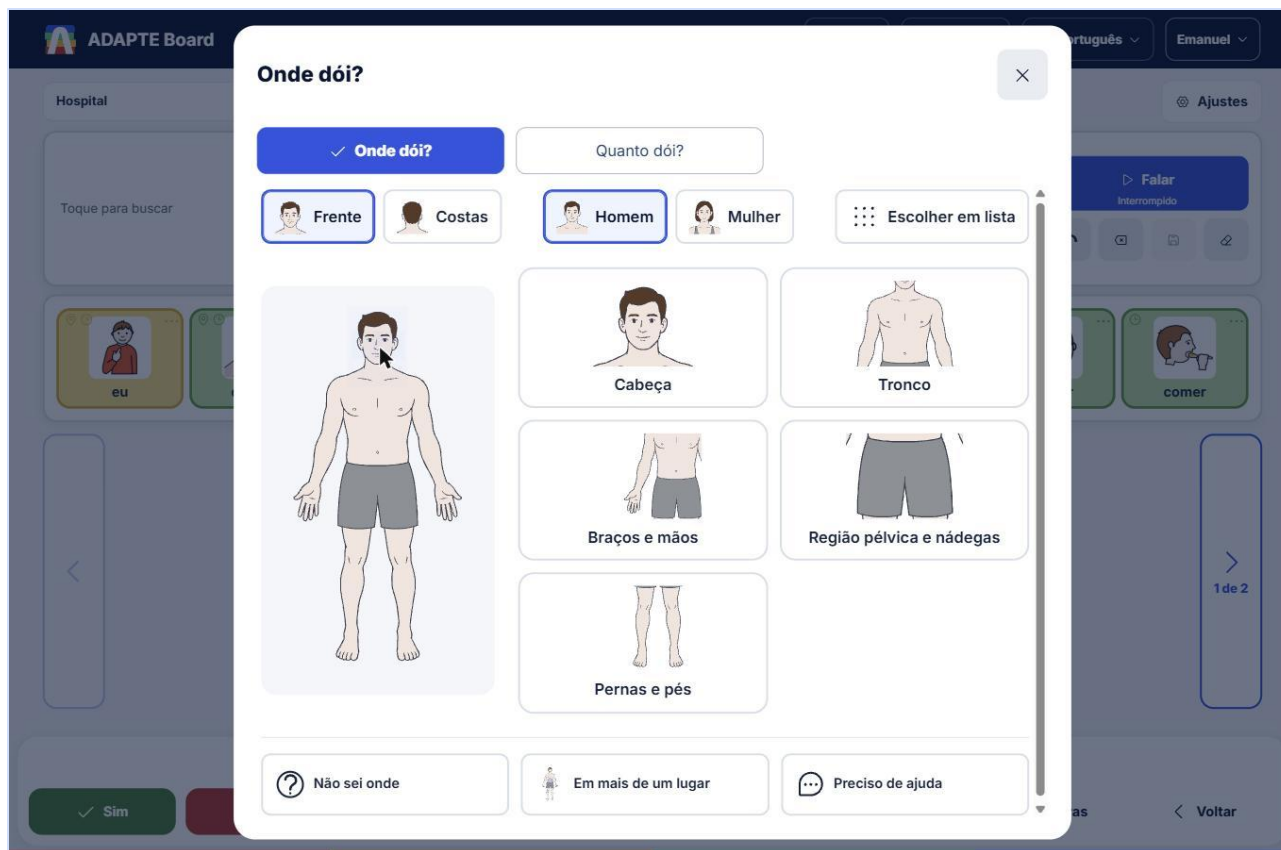


Toque na parte do corpo e o app fala “Dói na cabeça”. Lado é opcional. Escolher em lista para quem não aponta.

Não sei onde e Preciso de ajuda são respostas válidas. Não é avaliação clínica; não guarda histórico.


Painel do Hospital: abas Onde dói? e Quanto dói?

Quanto dói? em seis faces

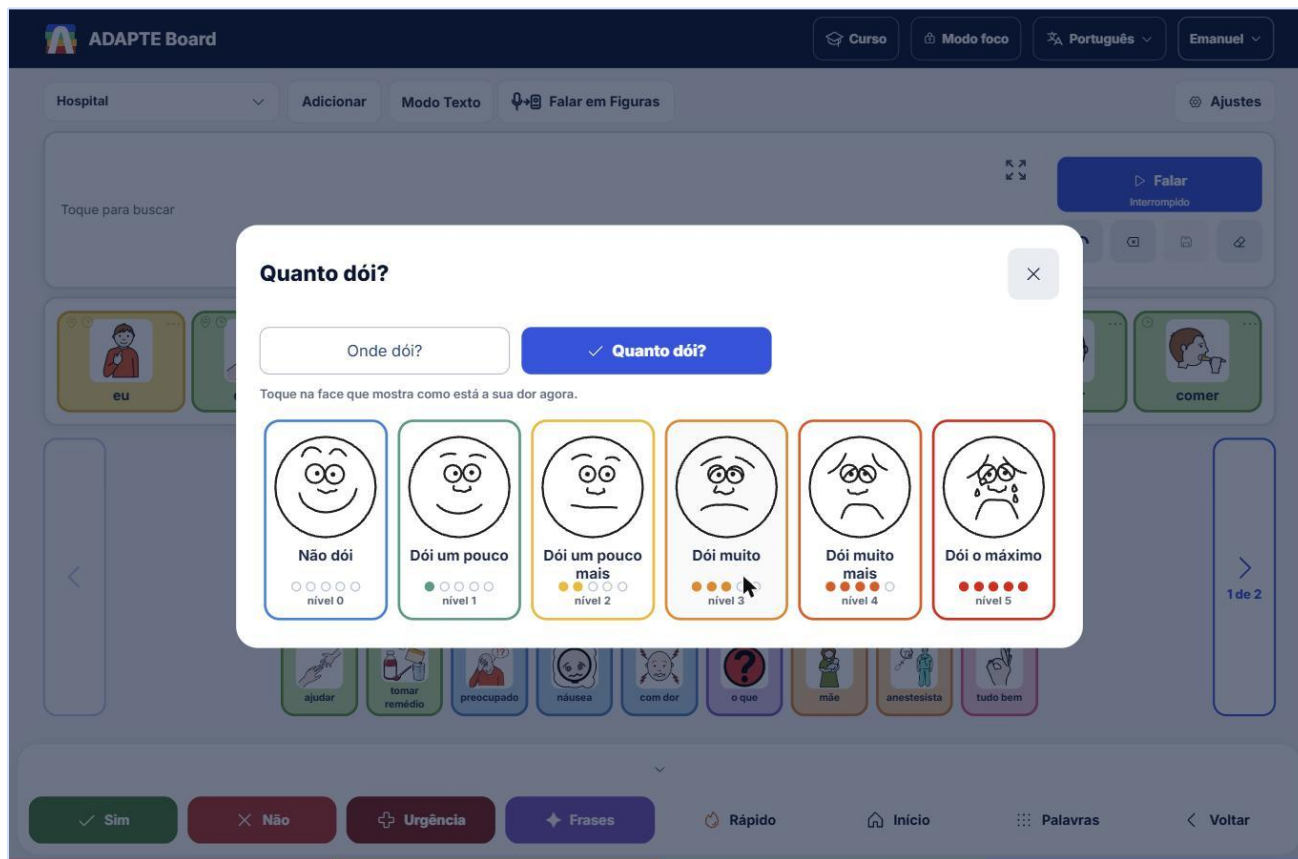

Escala de faces autoral, sem depender só de cor; nível 0 a 5 com bolinhas e rótulo falado

Modo Texto para quem escreve

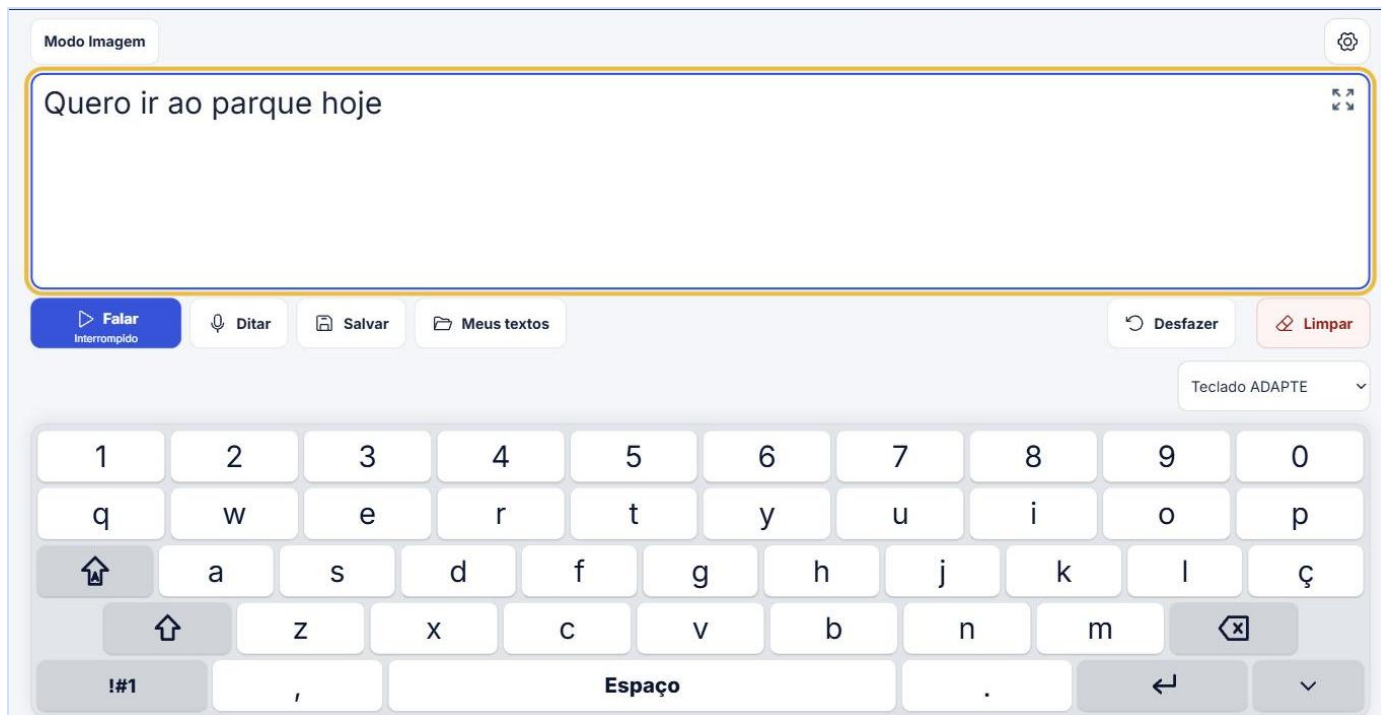

Um toque, uma letra. O app fala exatamente o que está escrito. Ditar, Salvar, Meus textos.

A frase atravessa entre os modos. O Teclado ADAPTE não corrige sozinho: mais previsível.

Modo Texto com “Quero ir ao parque hoje”

12 min

Prática guiada 2: dizer três coisas

Comente: “eu gosto disso”.

Recuse: “não quero”.

Peça ajuda usando a busca.

Uma das três no Modo Texto. Ninguém corrige a gramática de ninguém.

04

Ajustar para a pessoa

45 minutos · tamanho, personagem, tema, contraste,
formas do verbo, voz, velocidade e navegação

Onde ficam os Ajustes




Engrenagem no alto, à direita.
Tamanho, Navegação, Aparência,
Leitura, Formas do verbo, Voz, Sem
internet, Aplicativo, Rotinas, Conta.

No topo do painel: Imprimir A4,
Compartilhar e Curso. O painel some no
Modo foco.

Painel de Ajustes, seções Tamanho, Navegação e Aparência

Tamanho P, M, G e Cabe na tela

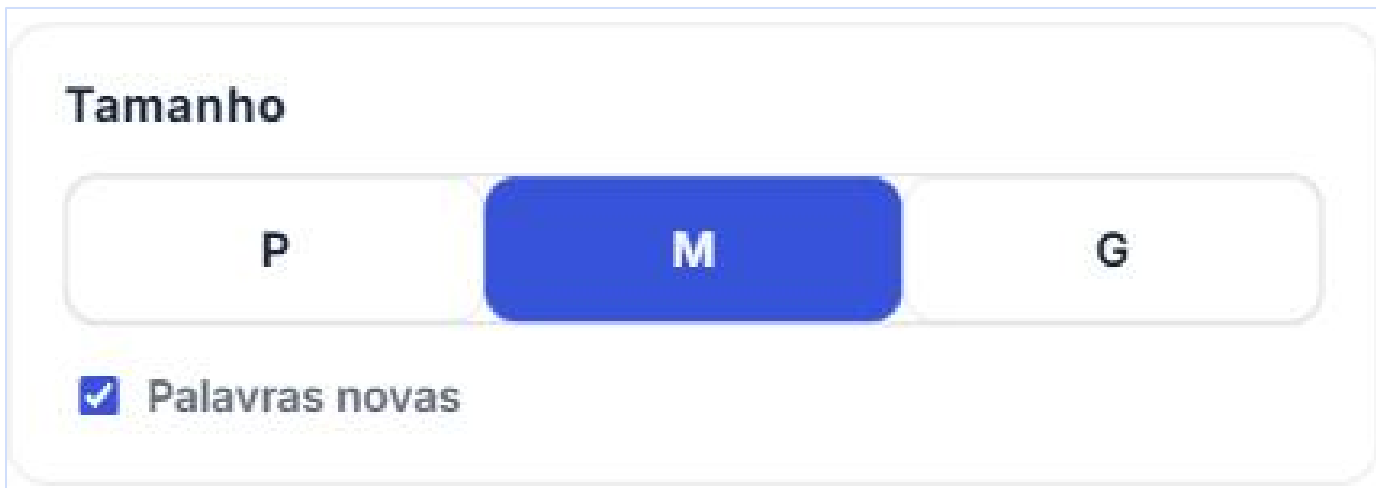

Tamanho

P M G

☒ Palavras novas

G: cartão maior, toque mais fácil, menos palavras por tela. Palavras novas deixa a prancha aprender.

Cabe na tela: nada rola; a grade vira páginas com setas. A legenda sai de propósito.

Aparência: personagem e tom de pele



Aparência

Menino Menina

Pele

1 2 3 4 5

aa Minúsculo

A↓ Inferior

Menino ou Menina muda as figuras de pessoa. Pele: cinco tons, nos pictogramas e no Onde dói.

Minúsculo e Inferior mudam o rótulo. A escolha é da pessoa que usa a prancha.

Seção Aparência

Cor da tela, contraste e leitura



The screenshot shows a settings panel with three main sections. The top section contains three buttons: 'Automático', 'Claro' (which is highlighted in blue), and 'Escuro'. Below these is a toggle switch labeled 'Contraste: off'. The middle section is titled 'Leitura e conforto' and contains a 'Tamanho das letras' dropdown menu set to 'Padrão'. Below this is an unchecked checkbox labeled 'Reduzir efeitos visuais'. The bottom section is a text input field with the placeholder text 'Sua mensagem' and a mouse cursor pointing at the start of the text.

Cor da tela: Automático, Claro ou Escuro. Contraste: alto contraste para baixa visão.

Leitura e conforto: Tamanho das letras e Reduzir efeitos visuais para quem se incomoda com movimento.

Seções Aparência e Leitura e conforto

Formas do verbo e Frase natural

Formas do verbo
☒ Todos os tempos do verbo

Voz

Automática (segue personagem)

Devagar

Normal

Rápida

☒ Frase natural
☐ Copiar a frase ao falar

Testar som

Toque longo num verbo abre as formas: quero, quis, queria. Todos os tempos do verbo mostra mais.

Frase natural: “eu querer água” vira “eu quero água” ao falar, com antes e depois na tela. Nunca acrescenta ideia.

Seções Formas do verbo e Voz

Voz, velocidade e Testar som

Voz

Automática (segue personagem)

Devagar Normal Rápida

☒ Frase natural

☐ Copiar a frase ao falar

Testar som

Voz: as do aparelho. Velocidade: Devagar, Normal, Rápida. Testar som confere a saída.

A voz é da pessoa: mostre duas e pergunte. "Tocou e não falou" é volume ou modo silencioso.

Navegação: Desligada, Assistida ou Automática



Navegação

Desligada

☐ Mostrar sugestões

☒ Cabe na tela

Ocultar cartões

Desligada é o padrão: a prancha fica onde a pessoa deixou. Assistida sugere o caminho. Automática volta sozinha.

Uma mudança por vez; observe uma semana. Ocultar cartões esconde palavras sem apagar.

Modo foco e PIN



Sair do Modo foco
Digite o PIN do cuidador.

Cancelar Desbloquear

[Esqueci o PIN](#)

Só a prancha fica. Para sair, PIN de 4 dígitos do adulto. Esqueci o PIN pede uma soma simples.

Não é castigo: todas as palavras continuam lá. O PIN é deste aparelho.

Cabeçalho, botão Modo foco; ao sair, o quadro pede o PIN

Roteiro de configuração: o que ajustar para quem

Se a pessoa...	Ajuste no ADAPTE Board
tem tremor ou toque impreciso	Tamanho G e Reduzir efeitos visuais
enxerga pouco	Contraste ligado, Tamanho das letras Maior, Tamanho G
se distrai com a linha de sugestões	Mostrar sugestões desligado
tem dificuldade para rolar a tela	Cabe na tela
está começando com poucas palavras	Ocultar cartões e liberar aos poucos
mexe nos ajustes sem querer	Modo foco com PIN
já escreve ou está aprendendo	Modo Texto com Teclado ADAPTE
quer se reconhecer nas figuras	Personagem, tom de pele e voz escolhidos por ela

20 min

Prática independente 1: configurar para o Heitor

Em duplas, no aparelho de um dos dois: tamanho, personagem e pele, cor da tela, voz e velocidade, navegação. Testar som. Por fim, Modo foco com PIN.

Use o roteiro de configuração. Depois, troquem de aparelho.

O que fica do Bloco 1

A prancha fala hoje,
com ou sem conta

Modelar, esperar,
reconhecer, reparar

Intervalo de 15 minutos. Voltamos para montar a prancha do Heitor.

05


Criar em Minhas pranchas

65 minutos · vocabulário, pictogramas, palavras,
categorias, frase inteira e teste com voz

Quais três palavras o Heitor mais precisa e ainda não tem?

Antes de abrir o Estúdio, responda em dupla, sem consultar: como abrir os Ajustes? O que o Modo foco esconde? Onde fica Trocar prancha?

Entrar no Estúdio: Minhas pranchas

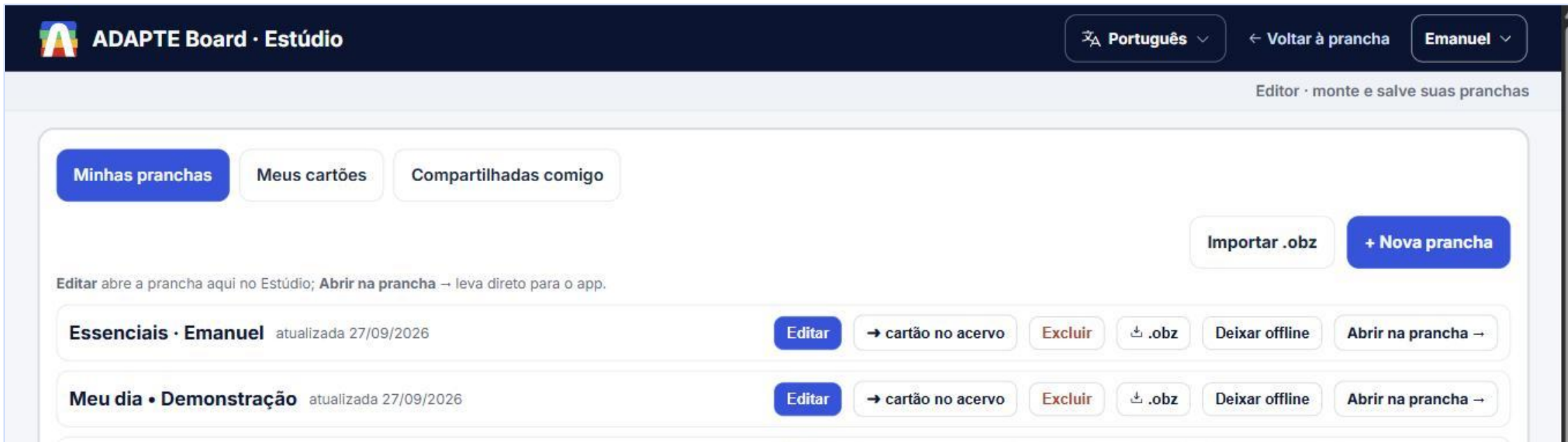

The screenshot displays the ADAPTE Board - Estúdio interface. At the top, there is a dark blue header with the ADAPTE logo, the text "ADAPTE Board · Estúdio", a language dropdown set to "Português", a link to "Voltar à prancha", and a user profile dropdown for "Emanuel". Below the header, a light blue bar contains the text "Editor · monte e salve suas pranchas". The main content area features three tabs: "Minhas pranchas" (active), "Meus cartões", and "Compartilhadas comigo". On the right side of this area are buttons for "Importar .obz" and "+ Nova prancha". A text instruction states: "Editar abre a prancha aqui no Estúdio; Abrir na prancha → leva direto para o app." Below this, two board entries are listed:

Board Name	Last Updated	Actions
Essenciais · Emanuel	atualizada 27/09/2026	Editar, → cartão no acervo, Excluir, .obz, Deixar offline, Abrir na prancha →
Meu dia · Demonstração	atualizada 27/09/2026	Editar, → cartão no acervo, Excluir, .obz, Deixar offline, Abrir na prancha →

Toque no seu nome, Minhas pranchas · Nova prancha, Importar .obz, Meus cartões, Compartilhadas comigo · Editar abre no Estúdio; Abrir na prancha vai direto ao app

Passo 1: a prancha

[← Minhas pranchas](#) **Nova prancha** [Salvar](#)

Nova prancha. Pronto para montar.

1 Prancha menino · pele clara

Nome da prancha

ex.: Recreio do João

Pele

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

Personagem

Menino


Menina

☐ incluir as 12 palavras essenciais (Mini core)

☐  esta é a prancha Início (única por conta, marcar aqui desmarca a anterior ao salvar)

Nome da prancha · Pele · Personagem · incluir as 12 palavras essenciais (Mini core) · esta é a prancha Início

Passo 2: adicionar cartões

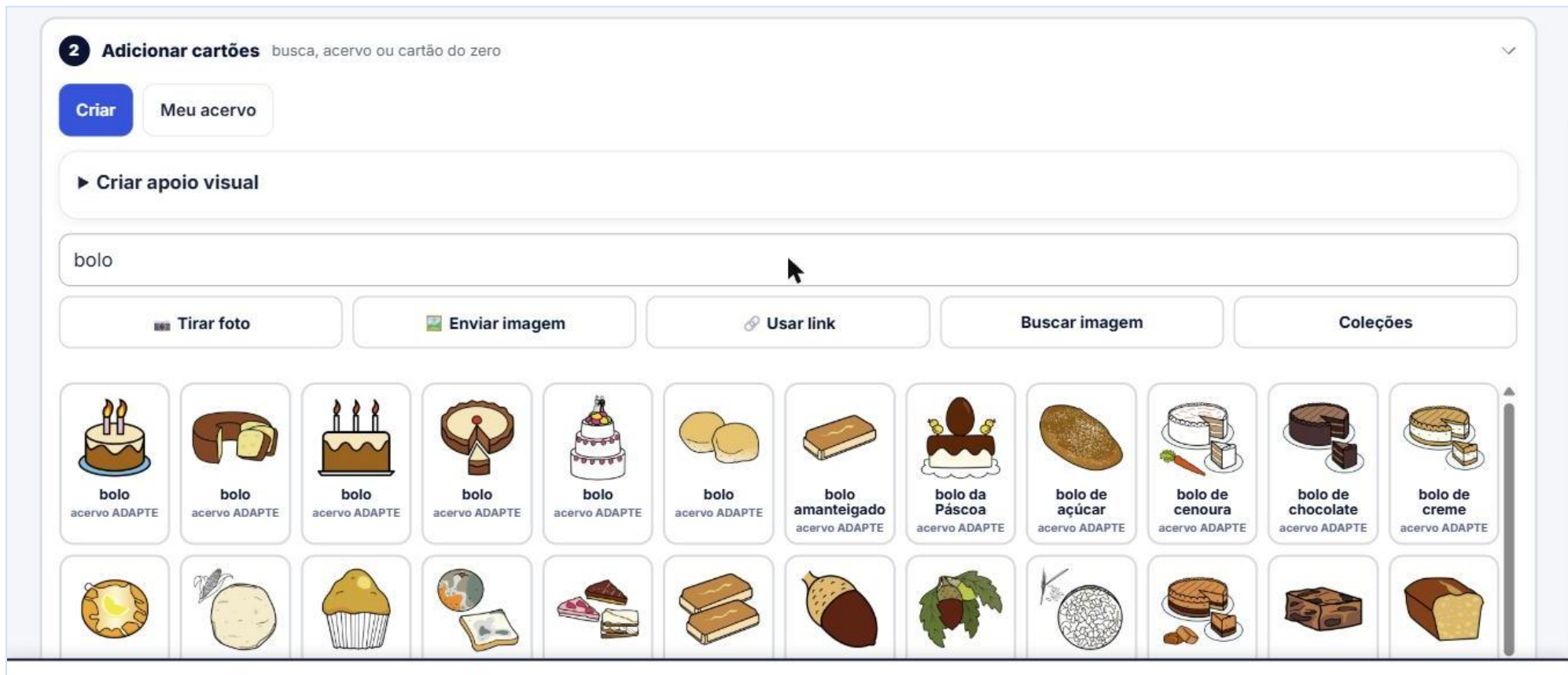

Buscar figura em todos os bancos (ex.: bolo) · Tirar foto · Enviar imagem · Usar link · Buscar imagem · Coleções · Meu acervo reaproveita cartões

Palavra no cartão e o que será falado

 figura escolhida 

 Gravar fala  Enviar áudio



Palavra no cartão

O que será falado (opcional)



Tipo do cartão



Substantivos ▾

+ Adicionar cartão

Rótulo curto (“bolo”) e frase completa (“Quero bolo”) podem ser diferentes · Tipo do cartão define a cor (Substantivos, Verbos...) · Gravar fala ou Enviar áudio · + Adicionar cartão

Foto própria e voz gravada



Na prancha, Adicionar: Tirar foto ou Escolher imagem. No Estúdio, Passo 2 ou Editar cartão, com recorte.

Gravar fala: a voz de alguém conhecido. Sem conta, foto e gravação ficam só neste aparelho; com conta, sobem ao Salvar.

Botão Adicionar, na barra de modos da prancha

Passo 3: na prancha

3 Na prancha 3 cartões

3 cartões · 1 × 3

Organização dos cartões

☒ Responsiva ☐ Grade fixa

☐ Vertical ☒ Horizontal ☐ Ordens independentes

A mesma ordem se adapta às duas telas.

Organizar por classe **Reorganizar** Agrupado por cor (Fitzgerald). O app reagrupa sozinho.

★ salvar todos no acervo **Salvar**

Responsiva ou Grade fixa (linhas × colunas) · Vertical e Horizontal, com Ordens independentes · Organizar por classe (cores Fitzgerald) · Reorganizar por arraste · salvar todos no acervo · Salvar

Editar cartão

Editar cartão

Palavra no cartão

bolo

Cartão ligado à palavra do acervo ADAPTE: acompanha as correções do acervo.

O que será falado (opcional)

Quero bolo

► O cartão em outras línguas

Categoria/cor

Substantivos

Imagem do cartão

Tirar foto

Escolher imagem

Buscar figura

Buscar imagem

Coleções

Arraste a imagem para posicionar e use o controle para aproximar.



Isto guarda o cartão aqui na prancha. Para gravar na sua conta, toque em Salvar depois.

Cancelar

Aplicar ao cartão

Gravação de fala (opcional)

Gravar fala

Enviar áudio

A gravação fica só neste aparelho até você tocar em Salvar. Ai ela vai para a sua conta e passa a tocar nos outros aparelhos, inclusive nos links que você compartilhar. Sem gravação, o cartão fala a frase por voz sintética.

Mais formas de dizer (variações)

Outras formas de comunicar a mesma intenção, cada uma com capa, frase, áudio e estrutura próprios. Nenhuma é "mais certa".

Nenhuma variação ainda. "Criar variação" para outra forma de dizer.


Criar variação

Palavra, fala, categoria e cor, imagem, gravação de fala, outras línguas e variações.

Aplicar ao cartão guarda na prancha em montagem. Salvar, na barra, grava na conta.

Quadro Editar cartão, no Passo 3

Cartão de frase inteira (Gestalt)

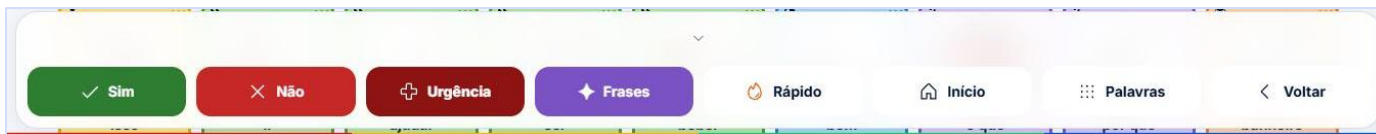

Monte a frase, toque em Salvar frase, escolha a figura, grave a voz se quiser. O cartão aparece em Frases, no dock.

Scripts e ecolalia são comunicação: a frase de desenho que a pessoa repete merece cartão.

Painel Frases, no dock

Testar com voz

Organização dos cartões

☒ Responsiva ☐ Grade fixa

☐ Vertical ☒ Horizontal ☐ Ordens independentes

A mesma ordem se adapta às duas telas.

Organizar por classe **Reorganizar** Agrupado por cor (Fitzgerald). O app reagrupa sozinho.

★ salvar todos no acervo **Salvar**



pão



bolo



café

Abrir na prancha, tocar nos cartões novos, montar uma frase e Falar · Testar som em Ajustes · quem testa é a pessoa; o adulto observa

33 min

Prática independente 2: a prancha do Heitor

Nova prancha “Café da tarde” com Mini core.

6 a 8 cartões da franja: café, pão, bolo, quente, quintal, música, Bolota.

1 cartão de frase inteira e 1 cartão com foto de um objeto real.


Organizar por classe. Salvar. Testar com a dupla.

06

Levar a prancha para fora


30 minutos · Biblioteca, compartilhamento, idiomas e PDF
A4

Biblioteca: o acervo inteiro por categoria

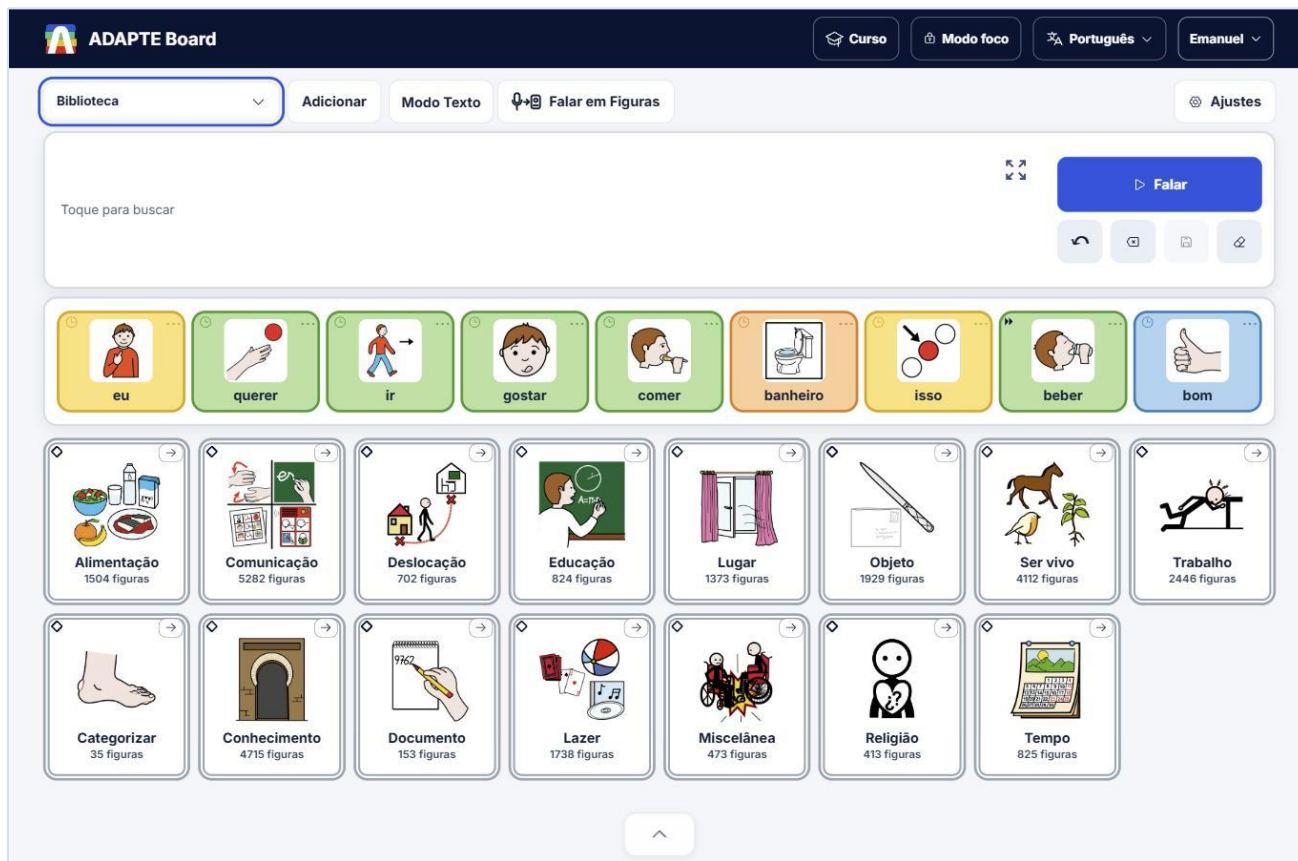

Trocar prancha, Biblioteca · Alimentação, Comunicação, Deslocação, Educação, Lugar, Objeto, Ser vivo, Trabalho, Conhecimento, Documento, Lazer, Tempo... · toque e fale por qualquer figura

Coleções e modelos prontos

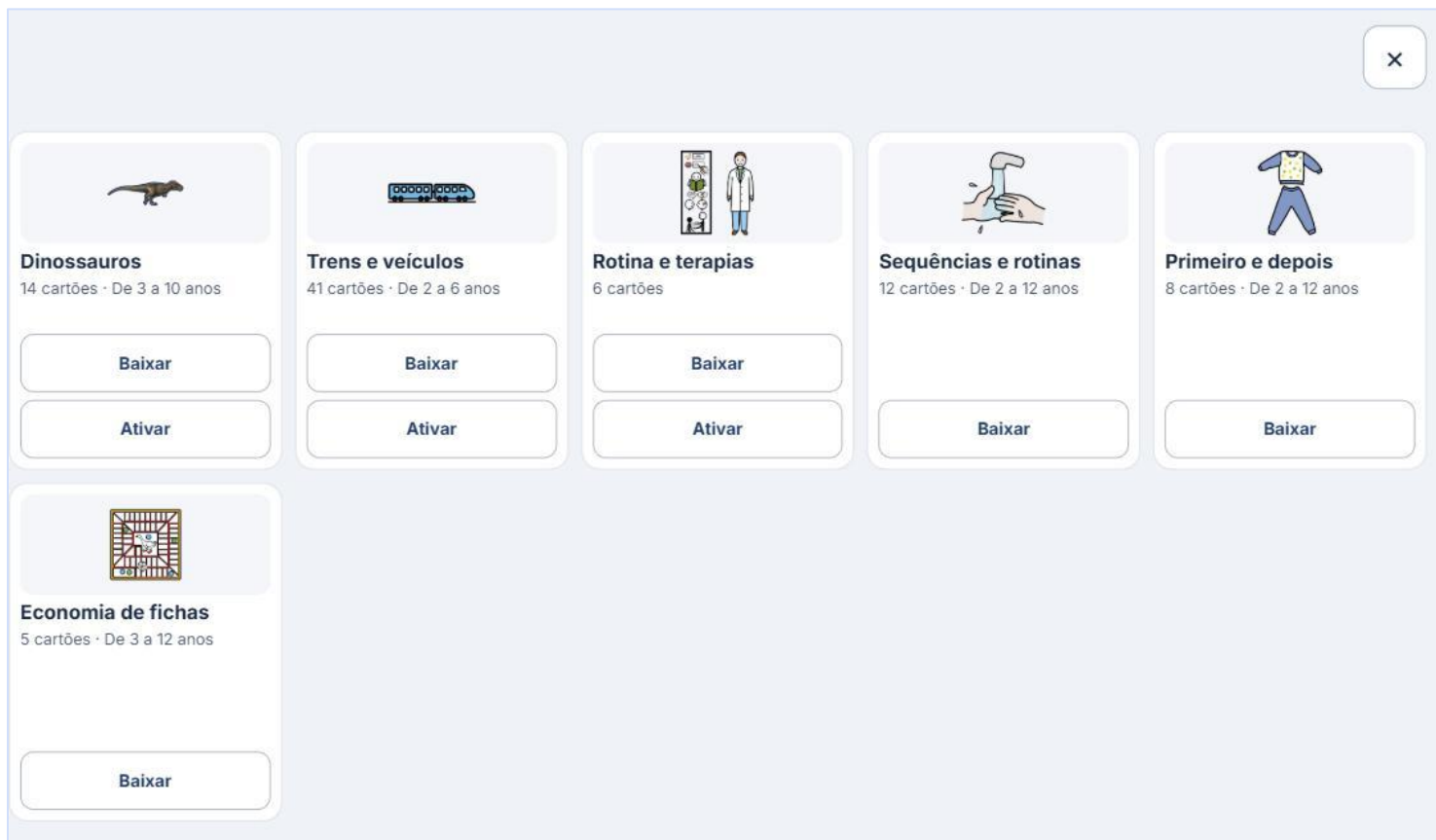

Trocar prancha, Coleções · Dinossauros, Trens e veículos, Rotina e terapias · Modelos: Sequências e rotinas, Primeiro e depois, Mapas de contingência, Economia de fichas · Baixar guarda neste aparelho; Ativar (com conta) mantém disponível

Sequência pronta: lavar as mãos

Lavar as mãos

← Voltar à prancha

Passo a passoRecomeçar

1



Molhar as mãos

✓ Concluir

2



Fechar a torneira

✓ Concluir

3



Passar sabonete

✓ Concluir

4



Esfregar palmas, costas, dedos e unhas por 20 segundos

✓ Concluir

5



Abrir a torneira e enxaguar

✓ Concluir

6



Fechar a torneira

✓ Concluir

7



Secar as mãos

✓ Concluir

▶□↓🖨

0 / 7 passos concluídos

 Preciso de ajuda

 Preciso de uma pausa

 Não quero

Passo a passo, Recomeçar, Concluir por passo, contagem de passos · Preciso de ajuda, Preciso de uma pausa e Não quero em toda sequência · ícones de tocar, baixar e imprimir

Compartilhar com a rede de apoio



Link vivo: mostra sempre a versão atual. Copiar link ou Enviar pelo WhatsApp. Revogar quando quiser.

Quem recebe vê e usa. Para editar, faz uma cópia em Compartilhadas comigo, sem alterar a original.

Botão Compartilhar, no topo do painel de Ajustes

Sete línguas, as mesmas figuras



Botão de idioma no alto: pt-BR, en-US, es-MX, de, fr, it e pt-PT. Troca rótulo, voz e interface.

Não é tradutor: troca o vocabulário coberto, com as mesmas figuras. A voz depende do aparelho.

Menu de idioma no cabeçalho; página Idiomas mostra o estado de cada língua

Imprimir A4

ADAPTE Board - Essenciais

 eu	 nós	 comer	 pegar	 beber	 muito	 feliz	 quando	 casa	 por favor
 isso	 querer	 poder	 ver	 colocar	 diferente	 triste	 por que	 água	 oi
 você	 ir	 ajudar	 parar	 estar	 igual	 quem	 aqui	 banheiro	 tchau
 ele	 fazer	 ser	 dar	 mais	 tudo	 onde	 dentro	 acabou	 sim
 ela	 gostar	 brincar	 abrir	 bom	 depois	 o que	 em cima	 obrigado	 não

Essenciais

ADAPTE Board - Autoria: Emanuel Santana e Marcia E. F. Pedralino Santana (ADAPTE) - Pictogramas: ARASAAC - Sérgio Palao - CC BY-NC-SA - Créditos completos: board.adapte.com.br/creditos

 **ADAPTE**

Ajustes, Imprimir A4 · A4 ou Carta, retrato ou paisagem · crédito ARASAAC no rodapé de cada folha · no diálogo do navegador, Salvar como PDF · modelos imprimem pelo ícone de impressora dentro do recurso

12 min

Prática 3: compartilhar e imprimir

Compartilhe o link da prancha do Heitor com a dupla pelo WhatsApp.

A dupla abre e testa.

Gere o PDF A4 da prancha.

Troque para outra língua e volte ao português.

07

Revisão e roteiro

25 minutos · recuperar sem consultar, fechar dúvidas,
levar o roteiro de configuração

Sem olhar o roteiro: quais são os três passos do Estúdio?

E mais: onde fica Trocar prancha? Como sair do Modo foco? Como alguém da rede recebe a prancha? Quem decide a resposta?



Roteiro de configuração em uma página

01



02



03

Abrir e entrar

board.adapte.com.br; Entrar com o Google; instalar na tela inicial; Guardar neste aparelho

Ajustar

Tamanho, personagem e pele, cor e contraste, voz e velocidade, navegação; Testar som; Modo foco

Montar

Minhas pranchas: nome e Mini core; cartões com figura, foto ou voz; frase inteira; Organizar por classe; Salvar

Levar para fora: Compartilhar o link, Imprimir A4 e deixar a prancha offline.

O que fica com quem

Com a pessoa, a família e o parceiro

Vocabulário do dia a dia, fotos, voz gravada, ajustes de tela, link compartilhado, impresso na geladeira.

Modelar, esperar, reconhecer, reparar.

Com a equipe competente

Avaliação, escolha do sistema, forma de acesso, metas e revisão: decisão compartilhada com a pessoa.

Dúvida registrada vale mais do que decisão improvisada.

O que fica desta formação

Falar hoje, com ou
sem conta

Montar, compartilhar
e imprimir

Modelar, esperar, reconhecer, reparar. A pessoa decide.

Abra o Board amanhã, na rotina

Uma cena, uma função além de pedir, um parceiro, uma alternativa sem tela e uma data para revisar.

Fontes e créditos

ARASAAC · Sergio Palao

Pictogramas sob licença CC BY-NC-SA; alguns modelos usam Sclera (CC BY-NC 2.0 BE). Página Créditos em board.adapte.com.br/creditos

NJC · ASHA

Communication Bill of Rights, 3ª edição, em redação própria; ASHA Practice Portal, Augmentative and Alternative Communication

ADAPTE Educação

ADAPTE Board, Emanuel Santana e Marcia E. F. Pedralino Santana; pesquisa vinculada à Poli-USP. Contrato 061/2026, Anexo I, FUMSSAR. Capturas reais de 28/09/2026